到微鏡

1年生物











Q.正しいのは?

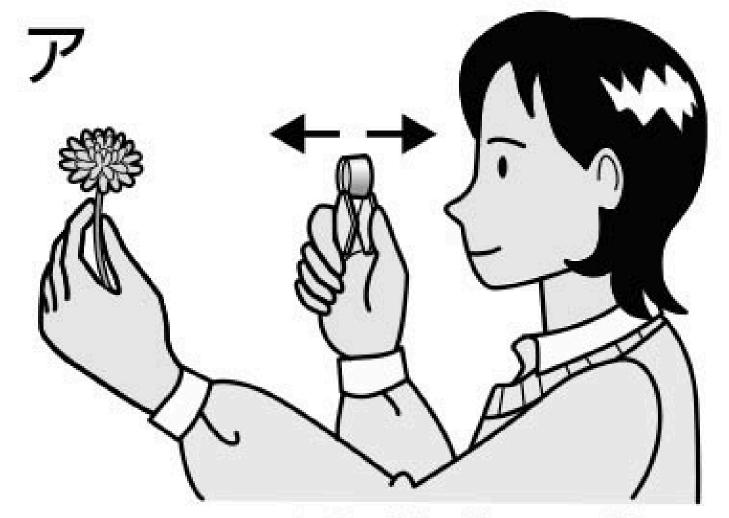


ルーペを前後に動かす。

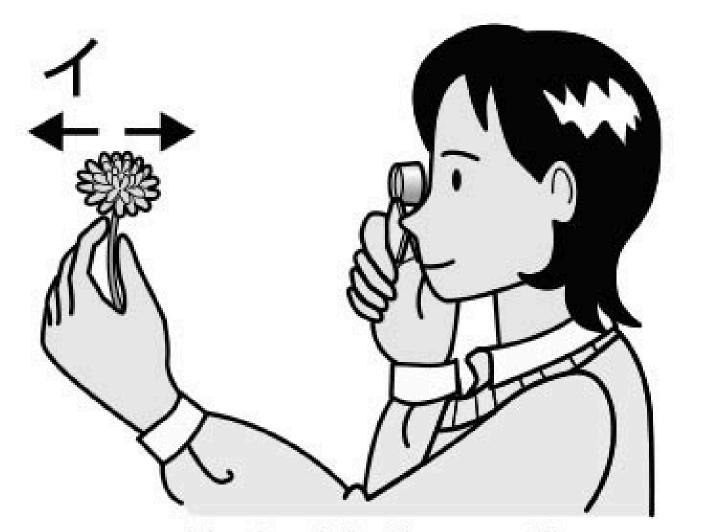


花を前後に動かす。

Q.正しいのは?

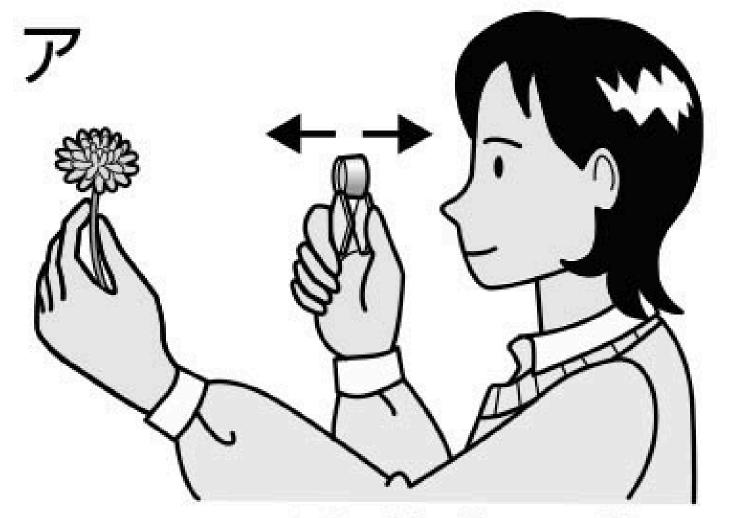



ルーペを前後に動かす。

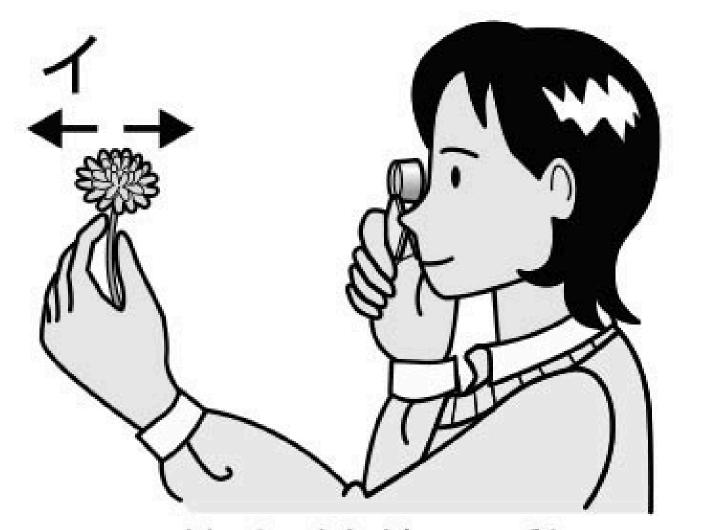

花を前後に動かす。



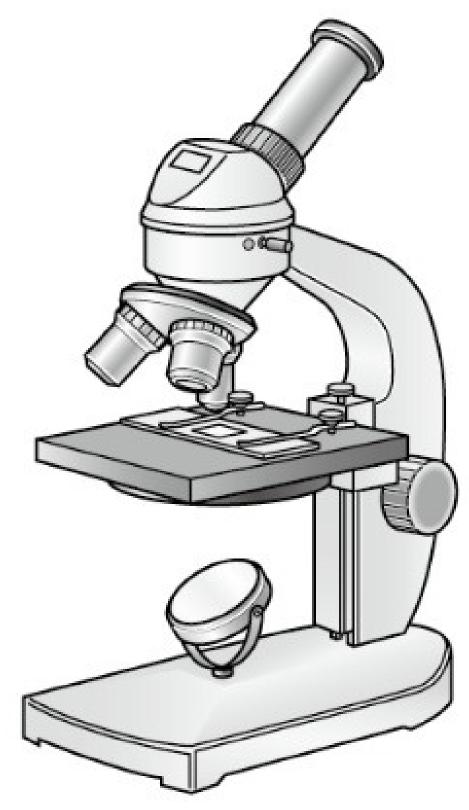

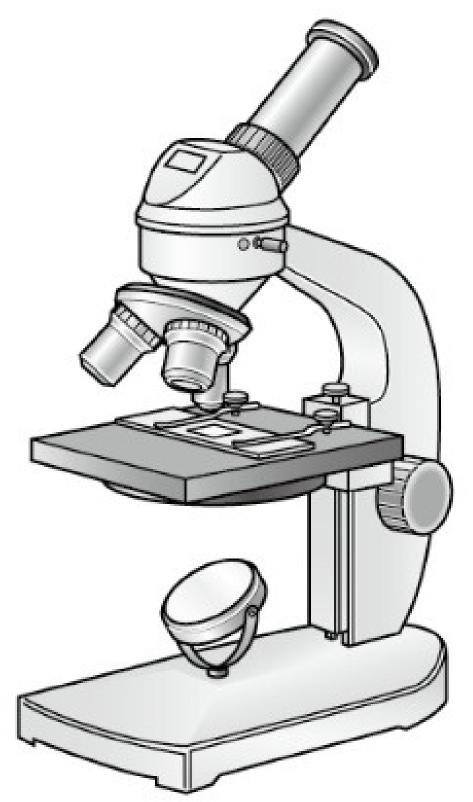

頭微鏡





顕微鏡の倍率=接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率


例 接眼レンズ10倍,対物レンズ4倍のとき,10×4=40(倍)

運び方



アームをにぎ り, 鏡台の下 に手をそえて もつ。

レンズのとりつけ方接眼レンズ、対物レンズの順につける。はずすときは逆。

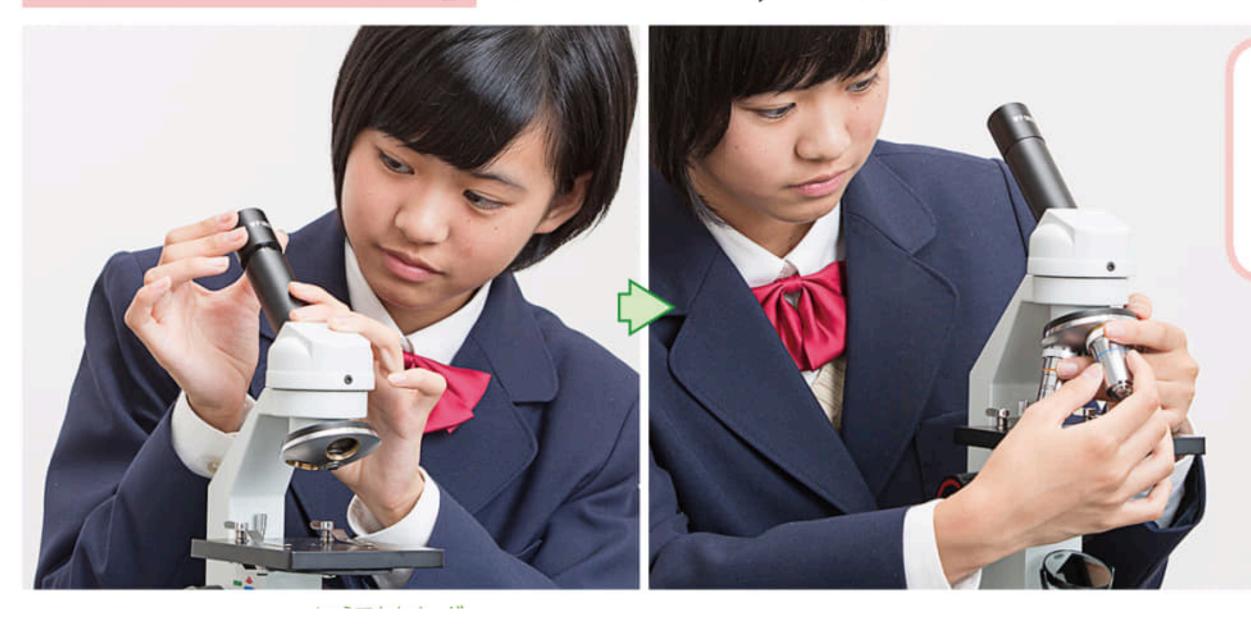

対物レンズを先につけると、 ごみが落ちて対物レンズを よごすことがあるよ。



















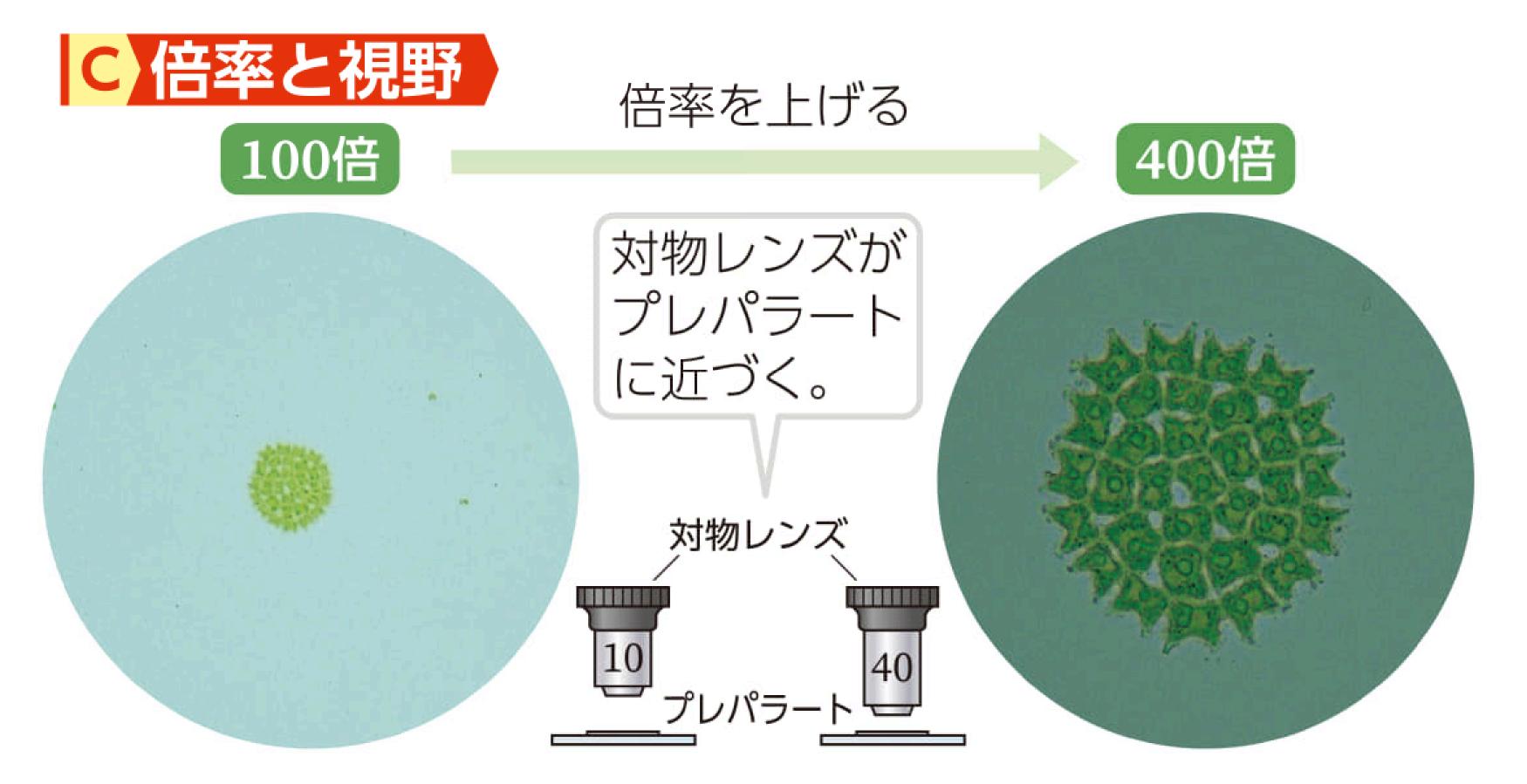

高倍率にすると、視野(見える範囲)はせまくなり暗くなる。 反射鏡を凹面にして明るくする。

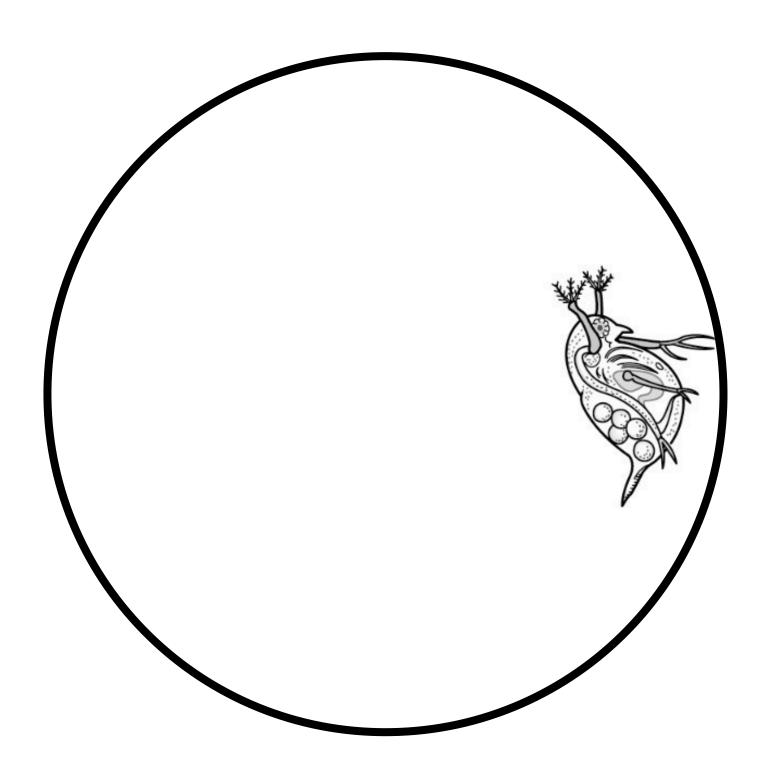

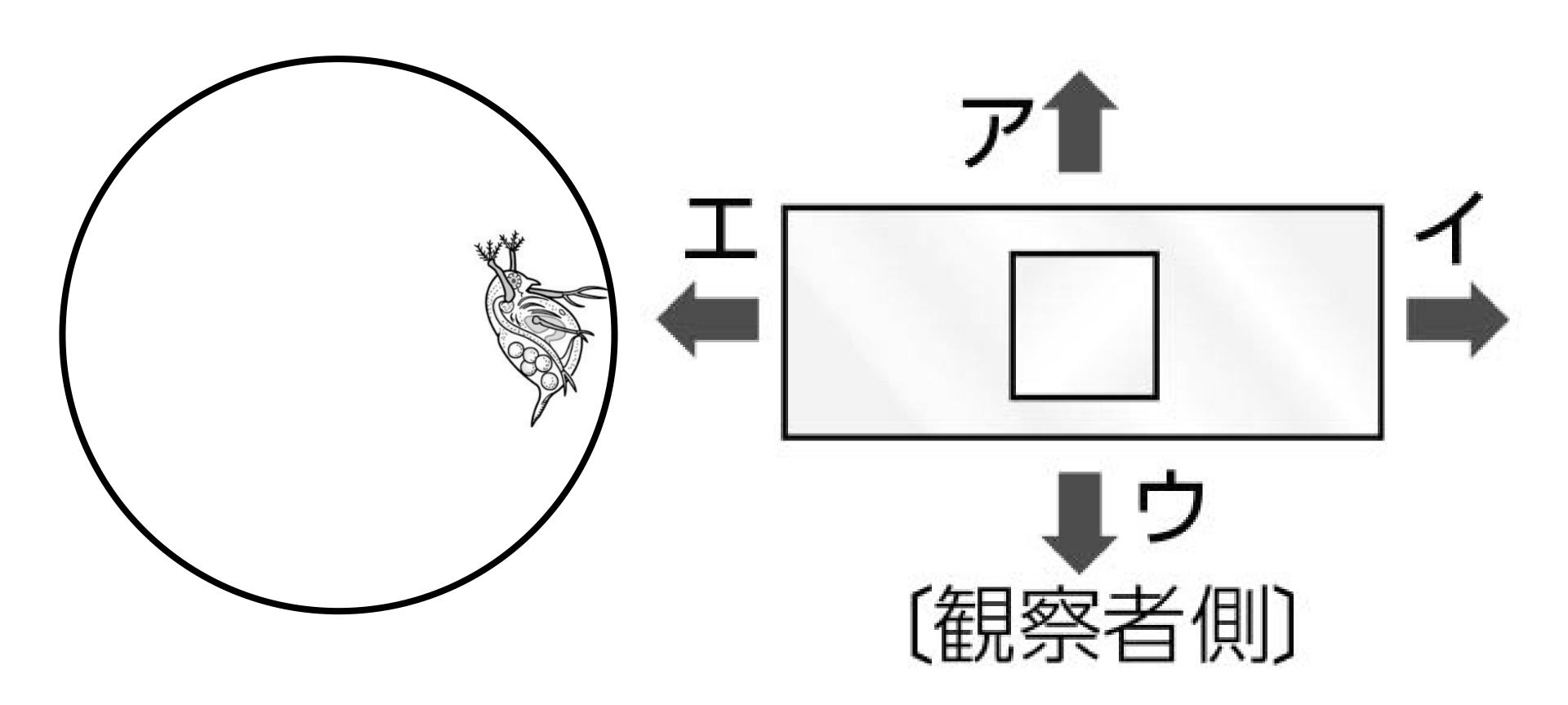

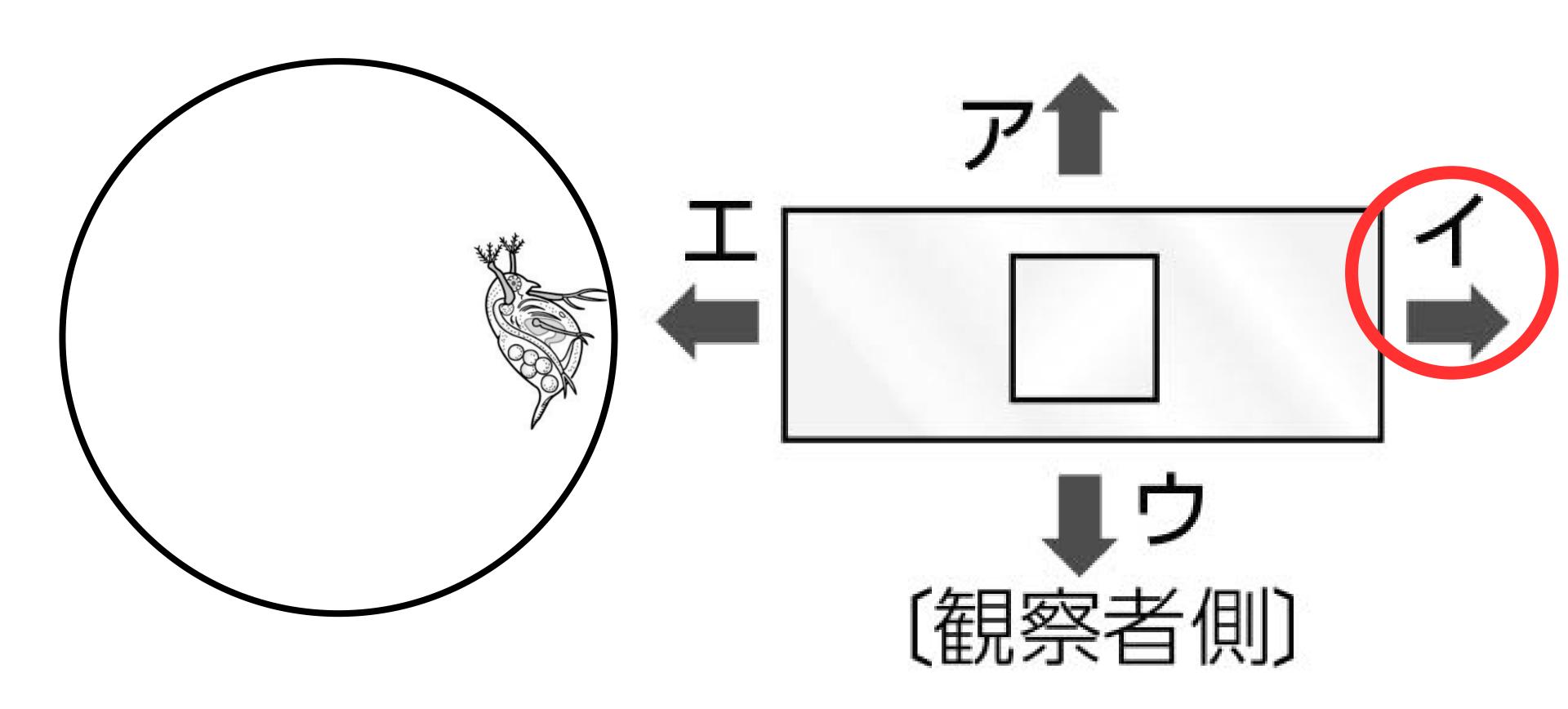






双眼実体


頭微鏡

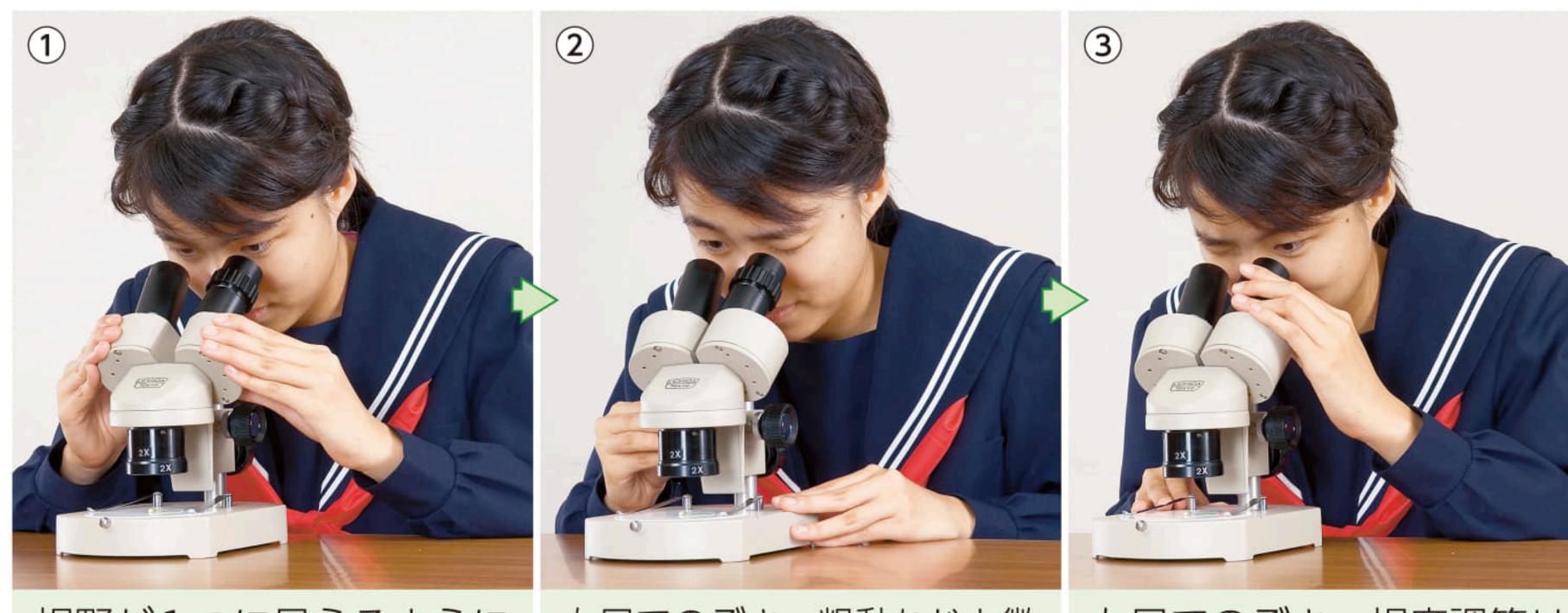


視野が1つに見えるように、右目でのぞき、粗動ねじと微接眼鏡筒の間隔を合わせる。動ねじでピントを合わせる。 右目でのぞき, 粗動ねじと微

左目でのぞき, 視度調節リ ングでピントを合わせる。

※およその倍率は,ルーペ:10~25倍,双眼実体顕微鏡:10~60倍,顕微鏡(♪p.36):40~2000倍

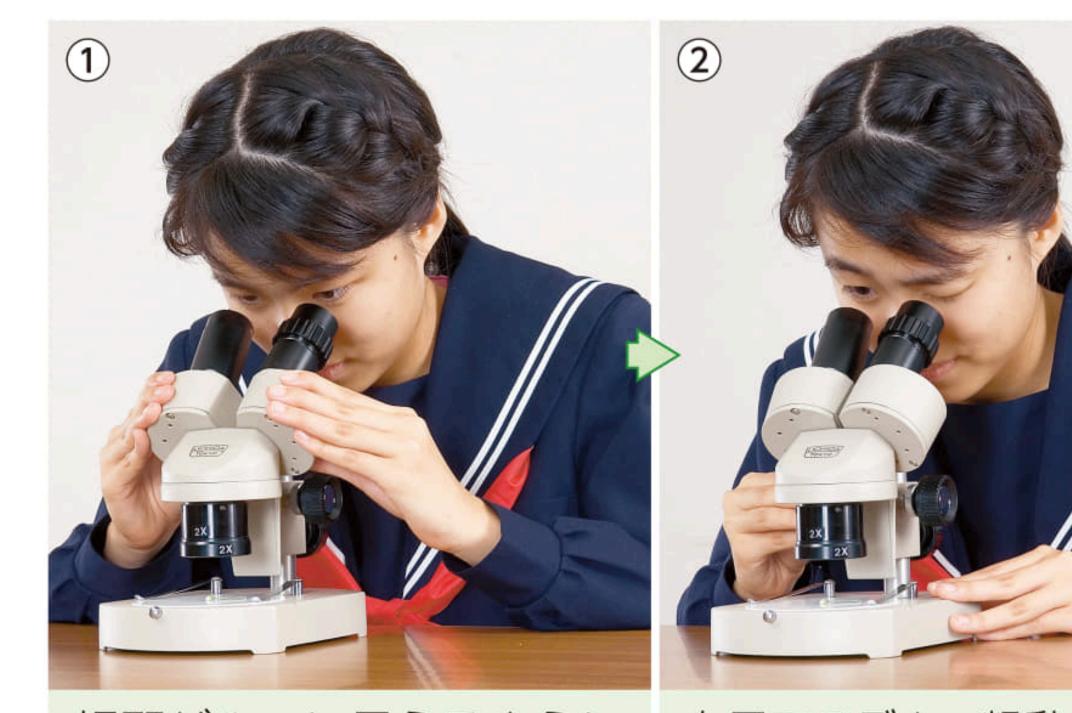

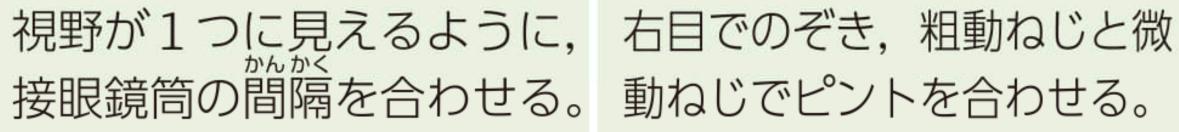



左目でのぞき、視度調節リングでピントを合わせる。

※およその倍率は,ルーペ:10~25倍,双眼実体顕微鏡:10~60倍,顕微鏡(♪p.36):40~2000倍

≪双眼実体顕微鏡の手順≫

